


Advazorb[®]

Hydrophile Schaumverbände

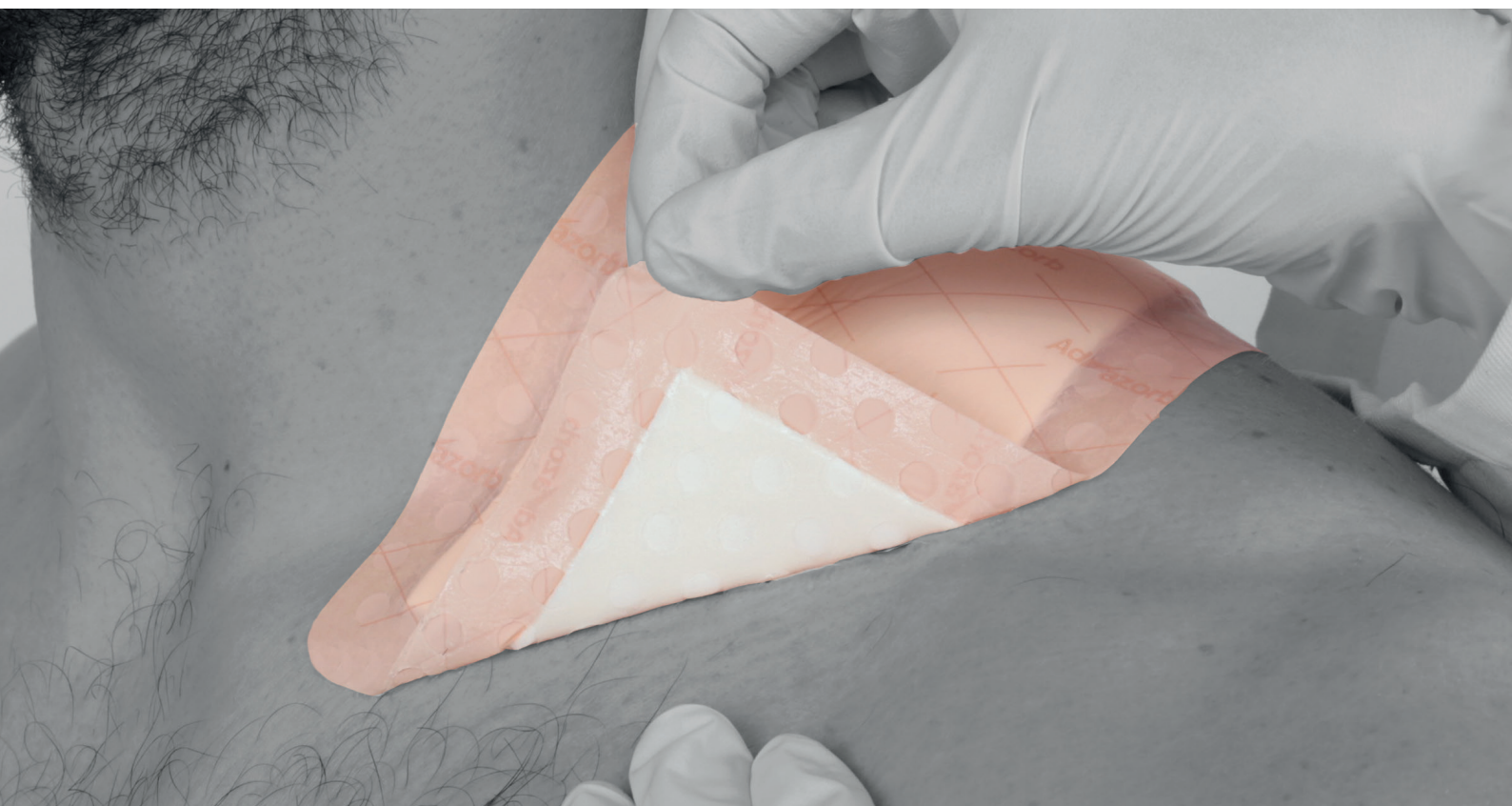

Leistungsstarke Wundbehandlung...

Schnelle Absorption, hohe Retention

Adv  **ancis**
M e d i c a l
www.advancismedical.de

Advazorb®

Hydrophile Schaumverbände

Die Advazorb® Produktreihe wird in unseren Produktionsstätten in Großbritannien hergestellt. Dort entstehen hochmoderne Qualitätsprodukte.

Die Advazorb® Reihe umfasst eine Palette von patientenfreundlichen Schaumverbänden - entweder nicht-haftend oder mit einem schonenden Silikon-Haftfilm versehen. Sie wurden speziell entwickelt, um den komplexen Herausforderungen des Exsudatmanagements gerecht zu werden, und dabei gefährdete und anfällige Hautbereiche zu schützen. Dies gelingt durch eine Kombination aus dem hervorragenden Flüssigkeitsmanagement von Advazorb®, verbunden mit einer atraumatischen Silikonklebeschicht.

Advazorb®, Advazorb Silfix® und Advazorb Border® sind in normaler Dicke für mittel- bis hochgradig exsudierende Wunden geeignet, während die dünnere Lightversion für leicht- bis mittelgradig exsudierende Wunden ausgelegt ist.



Advazorb Border®

Hydrophiler Schaumverband mit einer weichen Silikon-Wundkontaktschicht und einem Hafrand

Die Silikon-Wundkontaktschicht hat große Poren, die die Passage von Exsudat in den absorbierenden Schaum gestattet und das anfällige Wundbett schützt.

Diese Kombination gestattet eine sehr schonende Haftung bei minimierter Mazerationsgefahr.

- Der Verband weist neben dem hochwertigen Schaum und der reibungsarmen Außenschicht von Advazorb® und Advazorb Silfix® einen zusätzlichen Hafrand auf, der einen Sekundärverband überflüssig macht.
- Die weiche Silikon-Kontaktschicht erstreckt sich über die gesamte Auflagefläche und bietet eine sichere aber schonende Haftung.
- Geeignet für Wunden, wo ein Sekundärverband nicht erforderlich ist.
- Die großen Poren gestatten die Passage von Exsudat in den Schaum und bieten dabei optimale Haftung auf der Haut.
- Minimiert Schmerz und Trauma beim Wechsel oder der Entfernung des Verbands.
- Auch in 10 cm x 30 cm erhältlich, insbesondere für post-operative Wunden.



Advazorb Silfix®

Hydrophiler Schaumverband mit einer weichen Silikon-Wundkontaktschicht

Eine Kombination aus dem sehr guten Flüssigkeitsmanagement von Advazorb® verbunden mit einer atraumatischen Silikon-Haftschicht.

Das Silikon garantiert, dass die Auflage weder mit der feuchten Wundoberfläche verklebt noch während des Verbandwechsels am neu gebildeten Gewebe Traumata entstehen. Diese Eigenschaften sind vor allem bei Patienten mit problematischer Wundumgebung und bei schmerzempfindlichen Wunden gefragt.

- Besitzt neben dem hochwertigen Schaum und der reibungsarmen Außenschicht von Advazorb® eine zusätzliche, Silikon-Wundkontaktschicht.
- Durch die Silikon-Wundkontaktschicht kann die Auflage schonend angelegt und mit einem Sekundärverband geschützt werden.
- Die Auflage bietet eine gute Haftung auf der gesunden Haut. Die hydrophilen Eigenschaften des Silikons sorgen dafür, dass die Auflage nicht mit dem feuchten Wundbett verklebt.
- Minimiert Schmerz und Trauma beim Wechsel oder der Entfernung des Verbands
- Verhindert Verletzungen an neu gebildetem Granulationsgewebe
- Besonders geeignet für empfindliche Wunden mit anfälligen Hautbereichen, bei denen trotzdem eine gewisse Kompression nötig ist.

Produkt	Größe	Packungsinhalt	PZN
Advazorb Border®	7.5cm x 7.5cm	10 Stück	10074212
Advazorb Border®	10cm x 10cm	10 Stück	10074092
Advazorb Border®	12.5cm x 12.5cm	10 Stück	10074206
Advazorb Border®	15cm x 15cm	10 Stück	10074123
Advazorb Border®	10cm x 20cm	10 Stück	10074100
Advazorb Border®	20cm x 20cm	10 Stück	10074146
Advazorb Border®	10cm x 30cm	10 Stück	10074117
Advazorb Border Lite®	7.5cm x 7.5cm	10 Stück	10074235
Advazorb Border Lite®	10cm x 10cm	10 Stück	10074169
Advazorb Border Lite®	12.5cm x 12.5cm	10 Stück	10074229
Advazorb Border Lite®	15cm x 15cm	10 Stück	10074181
Advazorb Border Lite®	10cm x 20cm	10 Stück	10074175
Advazorb Border Lite®	20cm x 20cm	10 Stück	10074198
Advazorb Border Lite®	10cm x 30cm	10 Stück	10074152

Produkt	Größe	Packungsinhalt	PZN
Advazorb Silfix®	7.5cm x 7.5cm	10 Stück	09328972
Advazorb Silfix®	10cm x 10cm	10 Stück	09328989
Advazorb Silfix®	12.5cm x 12.5cm	10 Stück	09328995
Advazorb Silfix®	15cm x 15cm	10 Stück	09329003
Advazorb Silfix®	10cm x 20cm	10 Stück	09329026
Advazorb Silfix®	20cm x 20cm	10 Stück	09329032
Advazorb Silfix Lite®	7.5cm x 7.5cm	10 Stück	09329049
Advazorb Silfix Lite®	10cm x 10cm	10 Stück	09329055
Advazorb Silfix Lite®	12.5cm x 12.5cm	10 Stück	09329061
Advazorb Silfix Lite®	15cm x 15cm	10 Stück	09329078
Advazorb Silfix Lite®	10cm x 20cm	10 Stück	09329084
Advazorb Silfix Lite®	20cm x 20cm	10 Stück	09329090