

Eclipse[®]

Die schlanken Superabsorber




Mit und ohne Silikon-Haftschrift...

Advancis[®]
Medical

www.advancismedical.de

So ist Eclypse® aufgebaut

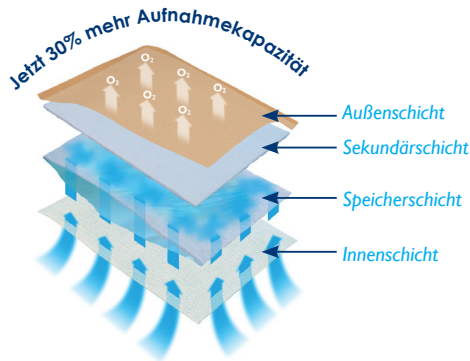

Die Außenschicht:

Die wasserabweisende äußere Sperrschicht von Eclypse® schützt entscheidend vor Exsudat Austritt und ist bakterien dicht.



Die Sekundärschicht:

Diese zweite Schutzschicht befindet sich unterhalb der Außenschicht und oberhalb der Feuchtigkeitsspeicherschicht.



Die Speicherschicht:

Die mittlere Schicht der Eclypse®-Wundauflage besteht aus einer Platte hochsaugfähiger Kristalle und einem mechanisch gebundenen Zellulosekissen.



Die Innenschicht:

Diese Schicht zieht das Exsudat aus dem Wundbett und gibt es an die Speicherschicht ab.



Weiche Silikon-Kontaktschicht

Die Silikon-Kontaktschicht haftet sicher auf der Haut, verklebt jedoch durch die hydrophobe Eigenschaft des Silikons nicht mit dem Wundbett.

Die Superabsorber der Eclypse®-Serie von Advancis medical werden in unseren modernen Produktionsstätten in Großbritannien hergestellt. Die Eclypse®-Serie umfasst eine breite Palette von Superabsorbentien entweder mit oder ohne Silikon-Kontaktschicht in verschiedenen Größen und Formen.



Eclypse®

Nicht haftende Superabsorber

Eine stark absorbierende Wundauflage, die die Gefahren von Exsudat Austritt und Mazeration minimiert, indem Flüssigkeit aufgenommen und sicher bewahrt wird.

An der Unterseite der Auflage wirkt der Dochteffekt, der die Feuchtigkeit rasch in die stark absorbierende Innenschicht leitet und sie dort sicher speichert. Diese Schicht bietet eine hohe Absorbtionskapazität und eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme. Der Sperrfilm der Außenschicht verhindert den Austritt von Flüssigkeiten und verlängert aufgrund der Atmungsaktivität die Verschleißzeit.

- Stark absorbierend
- Kein Flüssigkeitsaustritt, bakteriensichere Außenschicht
- Kann problemlos unter Kompressionsverbänden verwendet werden, da der Anpressdruck nicht nennenswert beeinflusst wird
- Absorbiert überschüssige MMPs und andere hemmende Faktoren für die Wundheilung
- Schlanke Form auch bei Sättigung
- Breite Auswahl an Größen, einschließlich 60 cm x 40 cm



Eclypse Border® and Eclypse Border Oval®

Superabsorber mit Silikon-Kontaktschicht und Hafttrand

Die weiche Silikon-Schicht bietet eine sanfte Haftung und ermöglicht eine atraumatische Entfernung der Auflage, während der hypo-allergene Randbereich zusätzliche Haftkraft gewährleistet.

Die Silikon-Kontaktschicht schont den umliegenden Wundbereich sowie das neu gebildete Gewebe und verklebt nicht mit dem Wundbett. Optimal geeignet, um schwierige Bereiche sicher abzudecken. Ein Sekundärverband ist nicht mehr erforderlich. Der Verband weist einen sehr guten Dochteffekt und eine erhöhte Aufnahmekapazität auf.

- Erhöhte Absorbtionskapazität
- Atraumatisch und hypoallergen
- Atmungsaktive, hydrophobe Außenschicht
- Erhält ein feuchtes Wundmilieu
- Sehr guter Dochteffekt
- Hypoallergener Hafttrand
- Auch in ovalen Größen erhältlich

Produkt	Größe	Auflagen pro Verpackung	PZN
Eclypse®	10cm x 10cm	20 Stück	08840455
Eclypse®	15cm x 15cm	20 Stück	08840461
Eclypse®	20cm x 30cm	20 Stück	08840478
Eclypse®	40cm x 60cm	10 Stück	08840484
Eclypse Border®	15cm x 15cm	10 Stück	10257987
Eclypse Border®	20cm x 30cm	10 Stück	10257993
Eclypse Border Oval®	10cm x 20cm	10 Stück	10258001
Eclypse Border Oval®	15cm x 20cm	10 Stück	10258018
Eclypse Border Oval®	20cm x 30cm	10 Stück	10258024

Kombinieren Sie Eclypse® für bessere Behandlungsergebnisse mit unserer Produktreihe aus 100 % medizinischem antimikrobiellem Manuka-Honig.

Advancis Medical Deutschland GmbH
Ruetersburg 48,
22529 Hamburg

Tel: +49 (0)40 874 080 62 | Fax: +49 (0)40 526 408 71 | Email: info@advancismedical.de

MAR413