

Eclipse[®]


Die schlanken Superabsorber



mit Silikon-Haftsicht...

Advancis
Medical
www.advancismedical.de

So ist Eclipse® aufgebaut

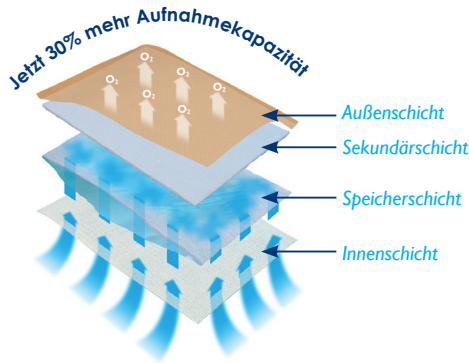

Die Außenschicht:

Die wasserabweisende äußere Sperrschicht von Eclipse® schützt entscheidend vor Exsudat Austritt und ist bakteriendicht.



Die Sekundärschicht:

Diese zweite Schutzschicht befindet sich unterhalb der Außenschicht und oberhalb der Feuchtigkeitsspeicherschicht.



Die Speicherschicht:

Die mittlere Schicht der Eclipse®-Wundauflage besteht aus einer Platte hochsaugfähiger Kristalle und einem mechanisch gebundenen Zellulosekissen.



Die Innenschicht:

Diese Schicht zieht das Exsudat aus dem Wundbett und gibt es an die Speicherschicht ab.



Weiche Silikon-Kontaktschicht

Die Silikon-Kontaktschicht haftet sicher auf der Haut, verklebt jedoch durch die hydrophobe Eigenschaft des Silikons nicht mit dem Wundbett.

Die Superabsorber der Eclipse®-Serie von Advancis medical werden in unseren modernen Produktionsstätten in Großbritannien hergestellt. Die Eclipse®-Serie umfasst eine breite Palette von Superabsorbententweder mit oder ohne Silikon-Kontaktschicht in verschiedenen Größen und Formen.



Eclipse Adherent®

Stark absorbierende Wundauflage mit Silikonbeschichtung

Stark absorbierende Wundauflage mit einer sanft haftenden Silikon-Kontaktschicht. Die weiche Silikonschicht bietet eine schonende Haftung und erleichtert ein atraumatisches Entfernen der Auflage. Eclipse Adherent® bietet als einziger Superabsorber diese spezielle traumareduzierende Technologie durch Silikonbeschichtung.

Die Silikon-Kontaktschicht schützt die umliegende Haut des Wundbereichs sowie das neu gebildete Gewebe und verklebt nicht mit dem Wundbett. Eclipse Adherent® kann zur Ausrichtung problemlos angehoben werden, ohne dass dadurch die Haftkraft verloren geht.

- Spezielle atraumatische Kontaktschicht kombiniert mit hoher Absorptionsfähigkeit
- Die Silikonschicht ermöglicht die Applikation der Auflage mit einer Hand
- Als Primärauflage einsetzbar
- Minimiert Schmerz und Trauma beim Entfernen der Auflage
- Kombinierte Wundauflage 2-in-1
- Erhältlich in den gängigen Größen



Eclipse Adherent Sacral®

Stark absorbierende Wundauflage für den Sakralbereich

Stark absorbierende Wundauflage mit einer weichen Silikon-Kontaktschicht, speziell optimiert für den Sakralbereich.

Der Sakralbereich gehört bekanntermaßen zu den Bereichen, die schwierig zu versorgen sind. Hier ist die Kombination aus Absorptionsfähigkeit, Sicherheit und Komfort besonders wichtig.

Eclipse Adherent Sacral® wurde gezielt entwickelt, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dadurch können Druckulcera and Sinus pilonidalis besser behandelt werden.

- Eine Kombination aus atraumatischer Kontaktschicht und hoher Absorptionsfähigkeit
- Anatomisch angepasste Form
- Die geringe Dicke und die abgerundeten Ecken der Auflage vermeiden ein Ablösen
- Die Silikonschicht ermöglicht die Applikation der Auflage mit einer Hand
- Als Primärauflage einsetzbar
- In zwei Größen erhältlich

Produkt	Größe	Auflagen pro Verpackung	PZN
Eclipse Adherent®	10cm x 10cm	10 Stück	08840389
Eclipse Adherent®	10cm x 20cm	10 Stück	08840395
Eclipse Adherent®	15cm x 15cm	10 Stück	08840403
Eclipse Adherent®	20cm x 30cm	10 Stück	08840426
Eclipse Adherent Sacral®	17cm x 19cm	10 Stück	08840432
Eclipse Adherent Sacral®	22cm x 23cm	10 Stück	08840449

Kombinieren Sie Eclipse® für bessere Behandlungsergebnisse mit unserer Produktreihe aus 100 % medizinischem antimikrobiellem Manuka-Honig.

Advancis Medical Deutschland GmbH
Ruetersberg 48,
22529 Hamburg

Tel: +49 (0)40 874 080 62 | Fax: +49 (0)40 526 408 71 | Email: info@advancismedical.de

MAR404

Advancis

Medical

www.advancismedical.de